



MISURATORE DEL PEAK FLOW



USO E MANUTENZIONE DEL MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO

È fondamentale mantenere il misuratore di picco di flusso sempre pulito e, se viene utilizzato di rado, effettuare la pulizia prima di ogni impiego. Questo strumento è destinato a un uso individuale e va igienizzato con cadenza semestrale. Gli operatori sanitari che impiegano lo stesso dispositivo per più pazienti possono richiedere le istruzioni per la pulizia presso Clement Clarke International Limited; l'indirizzo dell'azienda è indicato sul retro del dispositivo.

Indicazioni tecniche d'uso

Il flussometro segue le linee guida NAEP (Stati Uniti) e la norma n. 51 del Ministero della Salute del Regno Unito. Se riceverete un esemplare con scala nera, la sua precisione è garantita entro ± 10 % rispetto al riferimento standard. Se invece disponete di un modello con scala violacea recante la dicitura "ATS 94", la tolleranza sarà di ± 5 % (o ± 10 L/min) calcolata utilizzando il generatore di onde ATS con componente PW24.

Qualora il dispositivo non venga pulito per un periodo prolungato, è necessario igienizzarlo nuovamente prima di ogni utilizzo.

Verificare che il cursore sia collocato alla base della scala (indicazione L/MIN).

Maneggiare il flussometro con delicatezza, evitando di intralciare il movimento dell'indicatore con le dita e di coprire i fori nella parte finale dello strumento.


È consigliabile eseguire la prova in piedi. Inspirare il più profondamente possibile. Inserire il boccaglio tra le labbra, sigillandole attorno ad esso. Espirare con la massima forza e rapidità possibile nel boccaglio.

Rilevare il picco di flusso visualizzato.

Riportare con delicatezza l'indicatore alla base della scala (posizione L/MIN). Effettuare tre misurazioni e annotare sul foglio allegato il valore più alto rilevato.

PULIZIA DEL MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO

Per la pulizia del flussometro, immergerlo in acqua tiepida con una piccola quantità di sapone liquido delicato per circa due o tre minuti (al massimo cinque). Non utilizzare mai l'ebollizione. Dopo il lavaggio, scuotete delicatamente lo strumento per far uscire l'acqua residua all'interno e risciacquatelo con acqua pulita e tiepida. Infine, agitate nuovamente per eliminare l'acqua interna e lasciate asciugare completamente prima di riporlo o riutilizzarlo.

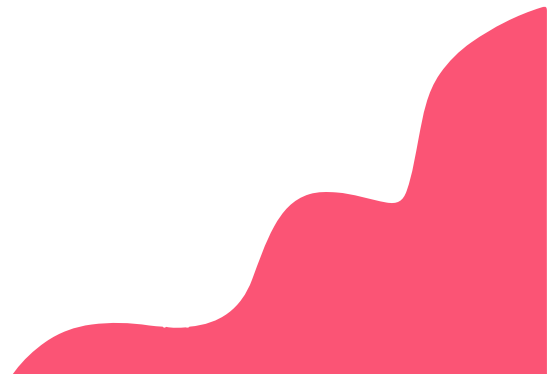

A cartoon illustration of a young boy and girl jumping happily. The boy, on the left, has dark hair and is wearing a green t-shirt and brown shorts. The girl, on the right, has brown hair in pigtails with pink bows and is wearing a pink dress. Both are smiling broadly with their arms outstretched.

PEAK FLOW MISURAZIONE.. MA COME LO UTILIZZO?



IL MODO DI DISEGNO DEGLI VALORI DEL MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO

Eseguire **ogni mattina e sera 3 misure prima di prendere il farmaco** e disegnate i valori supremi sul modulo di disegno.

Raccomandiamo di proseguire come segue (vedi esempio). Scrivere la data sotto le due linee verticali (nell'esempio).

Seguite ogni mattina e sera le due linee verticali, corrispondente mattina o sera fino la linea orizzontale che mostra il valore di Picco di Flusso misurato supremo (nell'esempio). Contrassegnate i punti d'incrocio con un cerchio. Con un tratto si vede la curva di Picco di Flusso della mattina e della sera.

